


زمان تعویض اتصالات بیمار

معاونت درمان-مدیریت پرستاری


دسته بندی	نام وسیله	زمان تعویض	توضیحات
سیستم گردش خون	آنژیوکت	96 ساعت	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی مانند عفونت، انسداد، فلیت، درد، قرمزی و... تعویض می شود. نوزادان و اطفال: در صورت وجود اندیکاسیون بالینی تعویض می شود.
	ست سرم و میکروست	72 ساعت	- در صورتی که مسیرست سرم به طور مداوم متصل باقی بماند و از مسیر آن محلولهای حاوی چربی، شیمی درمانی، پروتئین و گلوکزهایپرتونیک انفوزیون نشده باشد، ست سرم حداکثر تا 72 ساعت تعویض شود. - زمان مناسب جهت تعویض ست هایی که برای تزریق محلولهای حاوی چربی، شیمی درمانی، پروتئین و گلوکزهایپرتونیک استفاده شده، حداکثر تا 24 ساعت از زمان شروع تزریق می باشد. - ست هایی که برای تزریق پروپوفول استفاده می شوند هر 6 تا 12 ساعت (همزمان با تعویض ویال پروپوفول) تعویض شوند. - در صورت تزریق آلبومین، بعد از هر بار تزریق، تعویض گردد. نوزادان: هر 24 ساعت
	هپارین لاک، محلول سرم متصل به (میکروست و ست سرم)	24 ساعت	بیشتر از 24 ساعت استفاده نشود.
	کات دان	یک ماه	-
	ست خون /ست تغذیه وریدی	-	پس از هر بار ترانسفوزیون و تزریق
	سه راهی (تری وی)- ست K	72 ساعت	- در صورت انفوزیون محلولهای حاوی چربی، شیمی درمانی، پروتئین و گلوکزهایپرتونیک، حداکثر تا 24 ساعت از زمان شروع تزریق تعویض می شود. - در صورت تزریق آلبومین، بعد از هر بار تزریق، تعویض گردد.
	سرم شستشو	24 ساعت	در صورت باز شدن سرم شستشو حتما از الیگاتور استفاده گردد و تا پایان 24 ساعت الیگاتور بدون درپوش نگهداری نشود. باز کردن سرم با الیگاتور انجام شود نه با قیچی و....

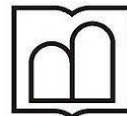

زمان تعویض اتصالات بیمار

معاونت درمان-مدیریت پرستاری


دسته بندی	نام وسیله	زمان تعویض	توضیحات
سیستم گردش خون	سوزن پورت	10 روز	توصیه می شود در صورت امکان جهت افزایش طول عمر و کارایی پورت، از سایر مسیرهای وریدی جهت تزریق خون و فراورده های خونی و فراورده های تزریقی استفاده شود و حتی المقدور از پورت فقط جهت شیمی درمانی استفاده گردد.
	سرنگ انفوزیون پمپ	-	بعد از هر بار اتمام انفوزیون دارو تعویض گردد.
	ویال های مولتیپل دوز	-	نگهداری طبق دستور کارخانه سازنده. ویال های دارویی چند دوزی آماده مصرف که نیاز به حلال ندارند و حاوی نگهدارنده می باشند مانند انسولین، تا 28 روز نگهداری در یخچال دردمای توصیه شده توسط کارخانه سازنده قابل استفاده می باشد. در صورت وجود کدورت یا تغییر رنگ و... دور ریخته شود. در معرض حرارت و نور خورشید قرار نگیرد.
	ویال های سینگل دوز	-	- بلافاصله بعد از برداشتن دوز مورد نیاز از دارو دور انداخته شود. ویال های بدون مواد نگهدارنده (محلولهای قندی، آب مقطر و آمپول ها)، آنتی بیوتیک جزو ویالهای سینگل دوز هستند، - ویالهای الکترولیتی مانند KCL, NaCL و ... بعد از پایان هر شیفت دور انداخته شود. (درج تاریخ شروع استفاده و شیفت کاری بر روی ویال الزامی است). - ویال متیل پردنیزولون بعد از باز شدن و استفاده دور انداخته شود. - آمپول هپارین بعد از باز شدن برای هپارینه کردن سرنگ در آخر هر شیفت دور انداخته شود.
	کاتترهای ورید مرکزی، شریان محیطی	-	تعویض به طور روتین با انگیزه کاهش ریسک عفونت انجام نشود. در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (عفونت، انسداد و...) با صلاحدید پزشک معالج تعویض می گردد. (پایش تا 72 ساعت بعد از تعبیه کاتتر روزانه و سپس هر 3 روز)

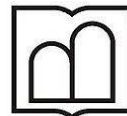

زمان تعویض اتصالات بیمار

معاونت درمان-مدیریت پرستاری

دسته بندی	نام وسیله	زمان تعویض	توضیحات
سیستم گوارشی	کیسه ایلئوستومی و کلتومی	بعد از هر بار مصرف	-
	سرنگ گاواژ	24 ساعت	-
	سوند معده	14 روز	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی مانند عفونت، انسداد، آسیب و... تعویض می شود.
سیستم تنفسی	چست باتل	-	در صورت پر شدن بیش از سه چهارم حجم باتل، درغیراینصورت حداکثر 5 روز تعویض گردد.
	AIR WAY	48 ساعت	-
	فیلتر آنتی ویرال و فیلتر HME	48 ساعت	در صورت وجود اندیکاسیون (خیس شدن) تعویض گردد.
	تیوب یا رابط ساکشن	7 روز	اختلاف نظر در 1 روز، 3 روز، 7 روز
	کاتتر ساکشن باز	-	کاتتر ساکشن باز یکبار مصرف می باشد
	کاتتر ساکشن بسته	3 روز	-
	لوله خرطوم، همودیفایر، ماسک اکسیژن، ماسک نبولایزر، کانولای اکسیژن، رابط اکسیژن، کاتتر مانت، Tpiece-اسپیسر.	اختصاصی بیمار	-
پانسمان	لوله تراشه	14 روز	در صورت وجود اندیکاسیون مانند عفونت، انسداد و... تعویض می شود.
	پانسمان های جراحی و درن		-پانسمان گاز استریل هر 24 ساعت -در صورت استفاده از پانسمان شفاف استریل هر 5-7 روز. -در صورت وجود ترشحات در زخم، پانسمان PRN
	پانسمان شالدون ها و CV LINE		-پانسمان کاتترهای موقت و CV line در سه روز اول تعبیه، هر 24 ساعت تعویض گردد. -از روز چهارم پانسمان هر 48 ساعت تعویض گردد. -پانسمان شالدون بعد از دیالیز انجام شود. -کاتترهای دائمی بعد از دو هفته نیاز به پانسمان ندارد.

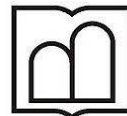

زمان تعویض اتصالات بیمار

معاونت درمان-مدیریت پرستاری

دسته بندی	نام وسیله	زمان تعویض	توضیحات
سیستم ادراری	سوند فولی	14روز	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی مانند عفونت، انسداد، آسیب و... تعویض می شود.
	سوند اکسترنال	48ساعت	بر حسب شرایط بیمار
	کیسه ادرار	-	همزمان با تعویض سوند
	چست لید	48 ساعت	-

نکته:

- 1- درمورد هریک از وسایل، توصیه اختصاصی کارخانه سازنده در ارتباط با نحوه استفاده، نگهداری و زمان تعویض مورد توجه قرار گیرد .
- 2- در صورت وجود اندیکاسیون بالینی، تعویض زودتر از زمان ارائه شده انجام گیرد.

منابع :

- 1- کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری
- 2 - مطالب کنگره کنترل عفونت 1404
- 3- کمیته کنترل عفونت بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل
- 4- دستورالعمل تعویض اتصالات دانشگاه علوم پزشکی تهران-مجمع بیمارستانی امام خمینی (ره)